


Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Avantgarde T

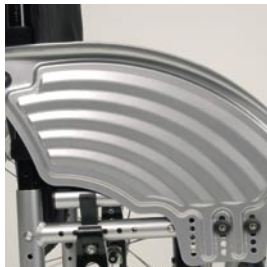

Avantgarde T är en funktionell och flexibel rullstol för aktiva brukare. En kryssramstol med låg vikt.

Rullstolen kan anpassas efter individuella behov, med hjälp av den nya ergonomiska ryggen med sin justeringsmöjlighet från -9° till +15°. Stolens tyngdpunkt kan anpassas individuellt tack vare den stora variationsmöjligheten i drivhjulens placering.

Design och funktion går hand i hand, allt ifrån den nya fotplattan i aluminium med "klick-funktion" till möjligheten att själv välja insvänging av ramens främre del.

Form & funktion – Detaljerna gör skillnaden!

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Avantgarde T i detalj

Anatomiskt justerbart ryggstöd med nytt bandsystem • Höjdjusterbart ryggstöd är standard • Nya sidostöd i aluminium • Nytt fotstöd som kan justeras i höjdlängd och vinklas • Noggrann justering av drivhulets position tack vare optimerade adaptorer • Instängningsvinkeln av främre delen av ramen kan varieras • ErgoBack - ryggstöd som är vinkeljusterbart från -9° till + 15°.

Tekniska data

Sittbredd	32-50 cm
Sittdjup	36-48 cm
Rygghöjd	25-50 cm
Främre sitthöjd	40-56 cm
Bakre sitthöjd	37-53 cm
Max. brukarvikt	125 kg
Vikt	från 11.5 kg
Sittvinkel	justerbart upp till 15°

- Stabil stol i aluminium med dubbelkryss
- Fotplattor i aluminium, hel eller delad
- Ryggen höjdjusterbar och anpassningsbar
- Sidoskydd i aluminium
- Optimal drivhjulpositionering med 13 olika höjdlägen och 6 olika tyngdpunktspositioner