

ottobock.



# BravoRacer

Rullstolen som anpassar sig till barnet

Bravo Racer är fastramstolen vars inställningsmöjligheter gör att barnets sittande och stolens köregenskaper optimeras. Sitthöjd, sittdjup, sitsvinkel, fotplattans läge samt balanseringsläge är justerbart för att kunna passa ett specifikt barns behov. Smarta lösningar som fällbar rygg, bromsens placering, stabila klädskydd samt många olika färger gör att BravoRacer är en stol som passar alla brukare, just för att vi är olika!

Quality for life

# BravoRacer


Den växande stolen

## Mervärden

- Stor och vändbar fotplatta förenklar en god positionering för fötterna
- Justerbart sittdjup och balansering
- Körbygel som är enkel att montera av och på
- Ställbar ryggvinkling med snabbkoppling
- Fällbar rygg gör stolen mindre vid transport

## Teknisk information

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sittbredd      | 20 - 36 cm     |
| Sittdjup       | 24 - 38 cm     |
| Rygghöjd       | 20 - 40 cm     |
| Underbenslängd | 15- 45 cm      |
| Sitthöjd       | 32 - 51 cm     |
| Max belastning | 60 kg          |
| Vikt           | från ca 8,5 kg |

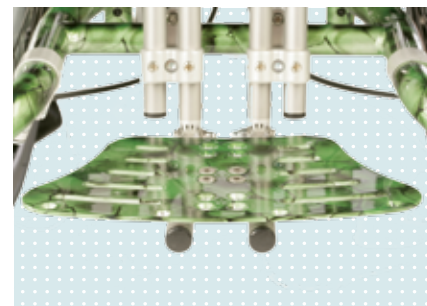

• Vinkelställbar och höjdjusterbar fotplatta



• Ryggvinkling med snabbkoppling



• Körbygel