



Sittdynor till rullstolar

Kännbar komfort!

För daglig användning eller för sportutövning: Komforten i en rullstol avgörs till stor del av valet av sittsystem. Det är anledningen till att Otto Bock har utökat sitt sortiment av sittdynor med de båda nya modellerna Evolight Pro och Combi^{3S}. Noggrant utvalda material säkerställer hög sittkomfort i kombination med säkert handhavande och bättre dynamik vid exempelvis sportutövning. Samtliga nya foam-dynor transporterar snabbt bort fukt via överdraget i textil som andas. Ta gärna en titt på vårt befintliga sortiment av sittdynor. Välj den modell som bäst passar dina behov ur vårt breda produktsortiment.


Basic Line

Skumdynor av hög kvalitet och för alla behov.
Tryckfördelande och positionerande dynor. Sårgrad 1 - (2)

Cubic Foam

Sittdynan Cubic Foam för rullstol ger bra tryckavlastning tack vare den kubformade designen. Kubdesignen ger även optimal luftcirkulation för ökad sittkomfort.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 500 g (42x42 cm)
Storlek: SB 26 - 60 cm
SD 28 - 54 cm
SH 5 cm

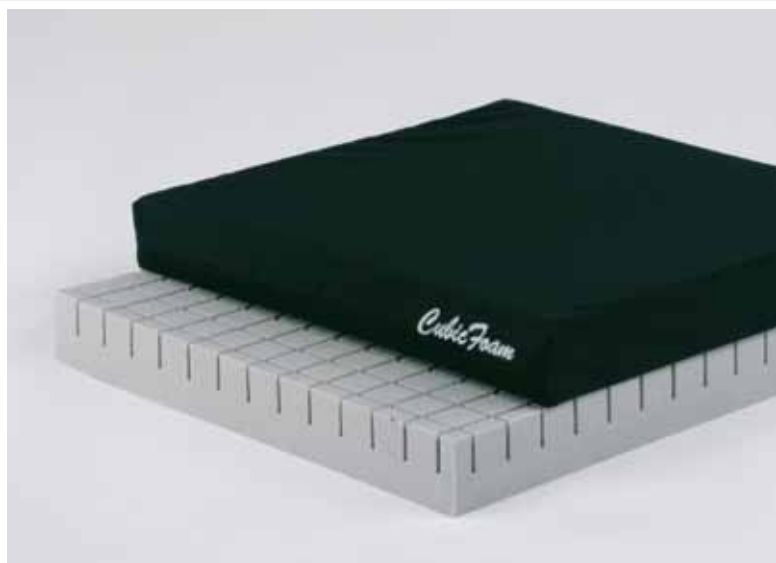

CombiFoam

CombiFoam är en sittdyna med uppbyggnad som kombinerar olika materialegenskaper. Bottenlagret av polyuretanskum ger en stabil sittbas.

Det mellersta lagret av Relax-skum ger låga skjuvkrafter som därigenom minskar trycket på utsatta delar av kroppen (t.ex. sittbensknölar). Det mjuka översta lagret formar sig individuellt och ger därmed en stor understödsyta.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 550 g (42x42 cm)
Storlek: SB 26 - 60 cm
SD 28 - 54 cm
SH 5 cm



ConturGel

Sittdynan Contour Gel består av ett tvålagers komposit-skum med ett yttre lager av TechnoGel®. Effektiv tryckavlastning tack vare V-formade utskärningar som styr låren. Ökad abduktion ger förbättrad positionering och stabilitet och förhindrar att brukaren glider framåt i rullstolen.

Mellanlagret av skum ökar dessutom stödet, samtidigt som det har en tryckavlastande effekt. Ytterlager av TechnoGel® som minimerar skjuvningskrafterna.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 1200 g (42x42 cm)
Storlek: SB 28 - 46 cm
SD 28 - 48 cm
SH 7-4 cm



Sportive Line

Lätta och luftiga sittdynor för den aktive brukaren.
Positionerande och tryckfördelande dynor. Sårgrad 1 - (2).

Evolight

Tack vare den innovativa, perfekta kombinationen av två olika material får Evolight toppbetyg för tryckavlastning och fukttransport. Materialens egenskaper förhindrar rodnad och tryckpunkter och ger huden bättre möjlighet att stå emot trycksår. Den kubformade designen minskar skjivningskrafterna och ger bra genomluftning. Sittdynan är klädd med två lager distanstextil som har integrerats i dynan och överdraget.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 500 g (42x42 cm)
Storlek: SB 26 - 60 cm
SD 28 - 54 cm
SH 7 cm

Evolight Pro

Den viktigaste egenskapen hos den nya sittdynan Evolight Pro är den formskurna profilen. Lår- och sidostöd i kombination med en upphöjd abduktionszon ger optimal säkerhet och stabilitet. Inlägg för extra tryckavlastning av sittbenet kan beställas som tillval.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 850 g (42x42 cm)
Storlek: SB 38 - 50 cm
SD 38 - 50 cm
SH 8 cm

Combi^{3S}

Combi^{3S} är en sittdyna med tre lager. De speciella egenskaperna hos materialet, som är uppbyggt i tre lager, säkerställer en hög komfortnivå. Det översta lagret består av tryckavlastande Relax-skum. En kännbar komfort helt enkelt.

Max. brukarvikt: 125 kg
Vikt dyna: ca 670 g (42x42 cm)
Storlek: SB 26 - 50 cm
SD 28 - 50 cm
SH 6 cm



Dynamic Line

Sittdynor med Floam-celler för individuell anpassning och förebyggande/behandling av trycksår.
Positionerande/korrigerande dynor. Sårgrad 2 - 3

Z-Flo

Z-Flo består av ett överdrag av polyuretan/stretchnylon som har fyllts med Floam™. Smart placering av sömmarna gör att Floam™-materialet kan fördelas fritt inne i sittdynan. Detta ger effektiv tryckavlastning och stöd vid tryckpunkterna. En specialfunktion är luftkanalen i sittdynans bas. Genom att luften i kanalen kan fördelas får sittdynan en perfekt passform. Den låga vikten och användarvänlig design gör att denna sittdyna har en mängd användningsområden.

Max. brukarvikt: 125 kg (< SB 45 cm)

Vikt dyna: ca 1670 g (42x42 cm)

Storlek: SB 38 - 50 cm, SD 40 - 46 cm, SH 7 cm

Advantage

Advantage kombinerar fördelarna med Floam™-celler och låg vikt och lämpar sig särskilt väl för aktiva rullstolsanvändare. Bas av format högkvalitetsskum med upphöjda abduktionszoner. Floam™-cellerna ger effektiv tryckavlastning. Genom att byta ut vissa celler går det att anpassa sittdynan efter individuella behov där det behövs mest. Advantage levereras med inkontinensöverdrag som standard.

Max. brukarvikt: 125 kg (< SB 45 cm)

Vikt dyna: ca 1750 g (45x45 cm)

Storlek: SB 35 - 46 cm, SD 35 - 42 cm, SH 8 cm

Cloud

Cloud är designad för rullstolsanvändare som vill ha optimal säkerhet och stabilitet kombinerat med maximal tryckavlastning. Sittdynan har en bas av format högkvalitetsskum. Undersidan av dynan är indelad i 16 celler som skapar ett anatomiskt mönster. Detta ökar kontakten mot underlaget och reducerar effektivt trycket. De horisontella Floam™-cellerna ger ytterligare stöd. Genom att Floam™-cellerna enkelt kan bytas ut, kan Cloud när som helst anpassas efter brukarens individuella behov. Cloud levereras med inkontinensöverdrag som standard.

Max. brukarvikt: 125 kg (< SB 45 cm)

Vikt dyna: ca 3300 g (45x45 cm)

Storlek: SB 35 - 48 cm, SD 40 - 46 cm, SH 10 cm



Reservation för tekniska ändringar

ottobock.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · 601 14 Norrköping · Telefon 011 28 0600 · Telefax 011 31 20 05 · info@ottobock.se · www.ottobock.se