

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Godkänd
för transport
i bil

Eco-Buggy

En mycket smidig och funktionell paraplysulky med rätt funktion och utrustning- Eco-Buggy är lätt att köra och väger endast 9 kg. Eco-Buggy är stadig och tål belastning upp till 50 kg.

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · 60114 Norrköping · Tel. +46 11 280600 · Fax +46 11 312005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se

© Otto Bock - OBS646S2-070126

Otto Bock Scandinavia AB
www.ottobock.se

Eco-Buggy

- för barnets bästa

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Eco-Buggy lämpar sig bäst för barn/ungdomar med små eller medelsvåra sittproblem. Den är utmärkt i stadsmiljö och för kortare körsträckor eller som avlastningshjälpmedel vid tillfälliga behov. För körning i terräng och för brukare med mycket svåra sittproblem rekommenderas Kimba Spring eller Kimba Cross.

Eco-Buggy är lätt men robust och är **krocktestad och godkänd** för transport i färdtjänstbil.

Sulkyn levereras med en komfortdyna. Dynan sitter fast med kardborreband för enkel borttagning. Dynan är tvättbar och gjord i slitstarkt brandklasstyg med skumgummistoppning. Dynan kan kompletteras med rampolstring som ger åkaren ett mjukt sidoskydd.

Eco-Buggy är smidigt ihopfällbar med några enkla handlag.

Varför Eco-Buggy?

- **Prisvärd**
Enkel logistik och lågt pris.
- **Snabb lererans**
Lagerlagd i Norrköping
- **Komplett**
Standardutrustad med höftbälte, varukorg, riktningsslås, vinklångsbar rygg och bekväm klädsel.
- **Tålig**
Klarar 50 kg brukarvikt och har en beprövad konstruktion med få lösa delar.
- **Funktionell**
Enkel att hantera och transportera samt lätt att köra och lyfta.
- **Säker**
Testad av HI enligt senaste kraven och krocktestad.



Eco-Buggy levereras som standard med formsydd klädsel som tillval kan matchande rampolstring erhållas.



Smidigt ihopfällbar utan verktyg. Kan parkeras stående.



Godkänd för transport enligt ISO-7176-19 RESNA WC och DIN 75078

Grundutförande

Ryggvinkeln kan steglöst justeras mellan 90° och 110° för att ge ditt barn bästa komforten.

Fotplattan kan ställas in i 6 olika längden för korrekt underbenslängd (UL) 20-34 cm

Bakhjulen har fotmanövrerade bromsar med stora och lättmanövrerbara låspedaler.

Eco-Buggy har länkhjul fram med riktningsslås. De är avfjädrade för mjukare gång och ökad komfort.

Fast varukorg för upp till 5 kg belastning och höftbälte är standard.

Tekniska data

Sittbredd	35 cm
Sittdjup	30 cm
Rygg höjd	55 cm
Ryggvinkel / Steglöst	90°-110°
Underbenslängd justerbar	20-34 cm
Max belastning	50 kg
Transportmått	30 x 40 x 120 cm
Hjuldiameter Fram/Bak	16.5 / 20 cm
Vikt	ca 9 kg

Tillval


- Rampolstring
- Transportfästen (endast som fabriksmonterade)

Nylonduk




Blå

Ramfärg

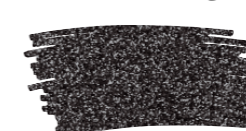

Antrazitemetallic

Komfortdyna

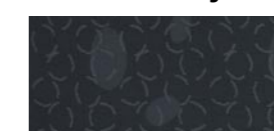

Ryggvinkel 90°



Ryggvinkel 110°



Höjjusterbar och sidovängbar fotplatta i 6 lägen




Fast varukorg för max 5 kg



Riktningsslås och fjädring på länkhjulen



Smidig bakhjulsbroms

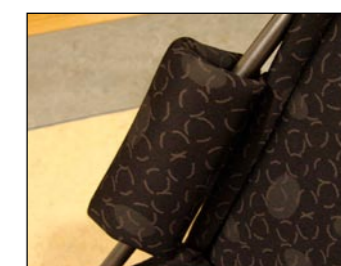

Rampolstring